

BEE O PIQUETE DE ABEJA

Objetivo:

- Aplicar un estímulo breve, intenso y focalizado sobre un punto doloroso. Se utiliza en casos donde el tratamiento anterior no generó un dinamismo significativo o cuando existe dolor residual localizado en una zona pequeña.

Usos:

- Dolor residual persistente tras un protocolo previo.
- Ausencia de dinámica del dolor durante otro tratamiento.
- Presencia de una zona pequeña de dolor localizada.

Aplicación del protocolo:

Explicar al paciente que la sensación será breve e intensa, similar a una picadura de abeja.

1. Localización del punto doloroso.
2. Con el dispositivo en stand by (pausa), acercarse a la zona de dolor.
3. Realizar una cruz de referencia colocando el electrodo de SCENAR arriba, abajo, izquierda y derecha del punto doloroso (sin activar aún el impulso).
4. Retirar el modo pausa.
5. Colocar el electrodo directamente sobre el punto de mayor dolor.
6. Esperar a escuchar el sonido característico de la descarga.
7. Retirar inmediatamente el dispositivo de la piel.

Indicaciones
Dolor puntual o focalizado
Parámetros
Dosis : 0 Energía : 250 AM: BEE Intensidad : 7 – 8
Duración
Segundos
Límites anatómicos
Punto doloroso



TIP:


Sólo se usa en dolores puntuales.



BEE o Piquete de abeja:

Recomendaciones y precauciones:

- Informar siempre al paciente antes de aplicar para evitar sobresaltos.
- No aplicar en mucosas, piel lesionada o heridas abiertas.
- Usar con precaución en pacientes con hipersensibilidad cutánea o baja tolerancia al dolor.

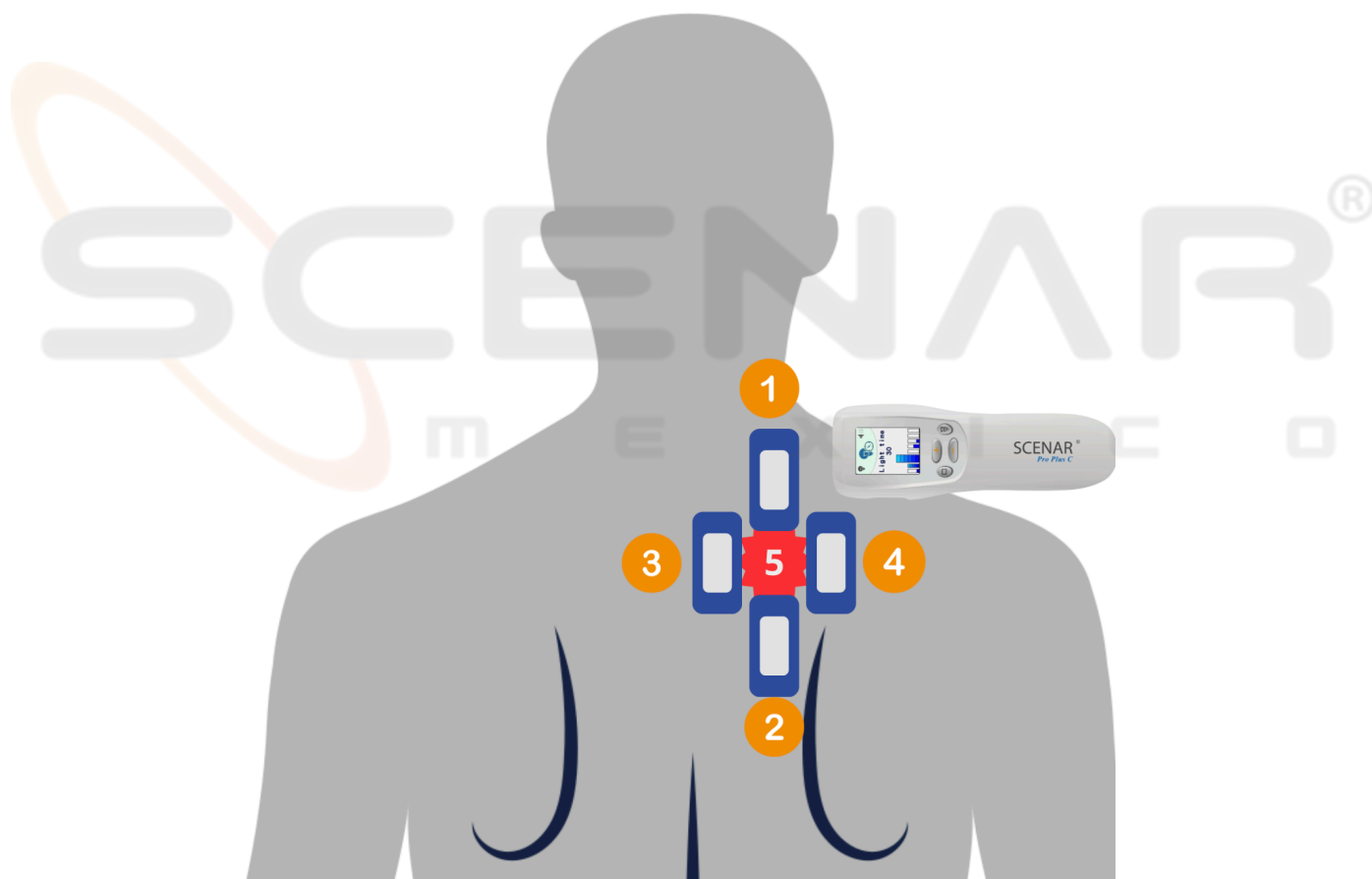

TIP:

Informar siempre al paciente antes de aplicar para evitar sobresaltos.



CÍRCULO DE REVENKO

Objetivo:

- Tiene como finalidad detectar y normalizar zonas de dolor localizado mediante una aplicación secuencial en forma de círculo alrededor del punto doloroso principal. Permite encontrar la dinámica del dolor y reducirlo de manera efectiva.

Usos:

- Dolor localizado y persistente acompañado de tensión muscular.
- Cuando el dolor regresa una sesión tras otra.

Preparación:

- Identificar el punto de mayor dolor mediante palpación o referencia del paciente.

Aplicación del protocolo:

- Coloque el dispositivo SCENAR directamente sobre el punto de dolor durante 30 segundos.
- Sin despegar el dispositivo, desplácelo lentamente de manera paralela al piso hacia la columna vertebral, siguiendo la misma altura del punto de dolor.
- Deténgase en las apófisis de la columna vertebral y mantenga el dispositivo durante 30 segundos.
- Continúe desplazando el SCENAR en la misma línea horizontal hacia la zona simétrica al punto de dolor y manténgalo durante 30 segundos.
- Regrese en la misma línea hacia el punto inicial de dolor, manteniendo nuevamente durante 30 segundos.

Nota : En ningún momento se debe despegar el dispositivo de la piel durante todo el recorrido.

Indicaciones
Dolor puntual o focalizado
Parámetros
Dosis : 0 Energía : comfortable Frecuencia: según necesidad Intensidad : 2-3
Duración
2 minutos
Límites anatómicos
Punto doloroso, punto simétrico, segmento de columna




TIP:

Se puede utilizar al finalizar un protocolo general , se realizan pruebas funcionales y si queda dolor puntual se aplica.



Círculo de Revenko:

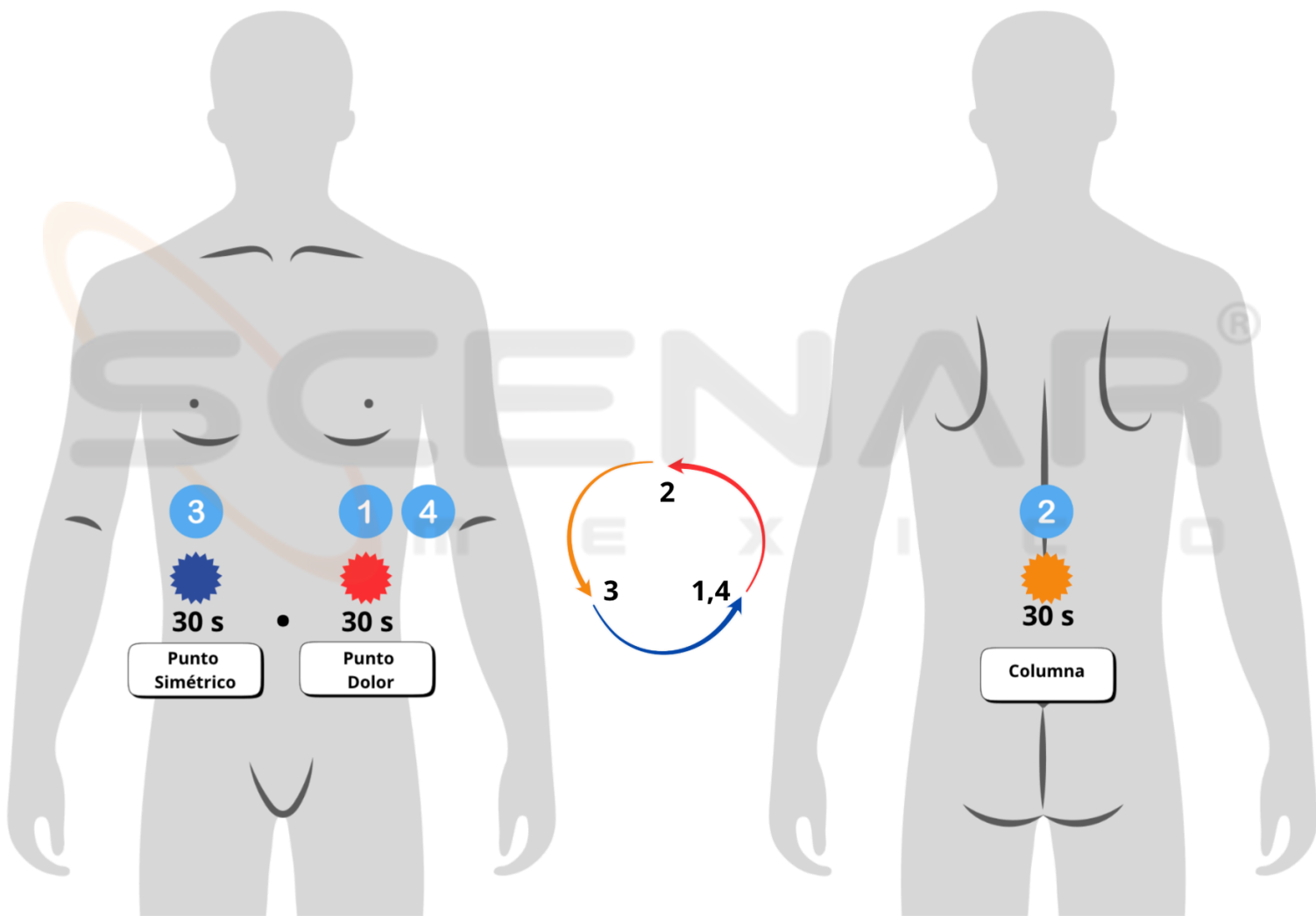

TIP:

Se realiza cuando el dolor se encuentra puntual en alguna parte del tronco.



ANALGESIA COMPETITIVA

Objetivo:

- Decirle al sistema nervioso central que existe un dolor más intenso que el real, con el fin de disminuir la percepción dolorosa en la zona tratada.

Usos:

- Dolor agudo o crónico localizado.
- Pacientes que no han respondido completamente a protocolos analgésicos previos.
- Se utiliza de manera puntual en la zona de mayor molestia.

Preparación:

- Identificar el punto de mayor dolor mediante palpación o referencia del paciente.

Aplicación del protocolo:

- Coloque el dispositivo SCENAR directamente sobre el punto doloroso.
- Comience a incrementar la energía progresivamente, hasta que el paciente indique que alcanzó su límite de tolerancia.
- Mantenga ese nivel unos segundos.
- Sin despegar el dispositivo, disminuya la energía gradualmente hasta llegar a 0.
- Repita este ciclo completo un total de 3 veces sobre el mismo punto doloroso.

Nota : En ningún momento se debe despegar el dispositivo de la piel durante todo el recorrido.

Indicaciones
Dolor puntual o focalizado
Parámetros
Dosis : 0 Energía : Máxima tolerada por el paciente
Duración
Aprox 1-2 min
Límites anatómicos
Punto doloroso.

1.



TIP:

Este protocolo busca generar una respuesta competitiva en el cerebro, reforzando la inhibición del dolor mediante la sensación de un estímulo más intenso y controlado.

